
# SNÍŽEK


ORTOPROTETIKA

## BANDÁŽ ŽEBERNÍ FIXAČNÍ

### SNÍŽEK 100HR

**Kód SÚKL:** 5002902
**Základní UDI-DI:** 859406790100HR5W

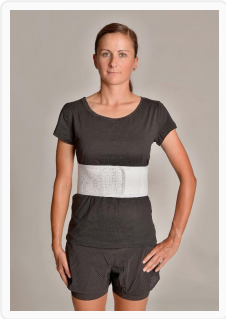

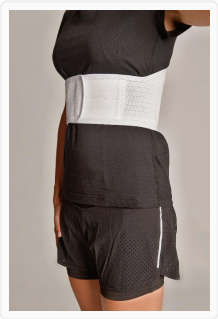

**PŘEDEPISUJE: CHR, NEU, ORP, ORT, REH, TRA, TVL**

## POPIS PRODUKTU

Elastický pás anatomicky tvarovaný, určený ke stažení hrudníku.

## INDIKACE

Úrazy hrudníku, zhmoždění či zlomeniny žeber a žeberních chrupavek.

## VARIANTY A BARVY

Provedení **DÁMSKÉ** nebo **PÁNSKÉ** (liší se tvarem).

## OBVOD A VELIKOSTI

Velikost se určuje měřením obvodu hrudníku.

| Velikost | Obvod hrudníku (cm) |
|---|---|
| **S** | 70 – 80 cm |
| **M** | 81 – 90 cm |
| **L** | 91 – 100 cm |
| **XL** | 101 – 110 cm |
| **XXL** | 111 – 120 cm |

## MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ

Elastický textilní materiál určený ke kompresi hrudní stěny s vysokou prodyšností a komfortem při nošení.

## SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA

Před praním zapněte suché zipy (velcro). Výrobek nevystavujte tepelnému zdroji převyšujícímu teplotu 40 °C.

- Hygienicky ošetřujte ručním praním ve vlažné mýdlové vodě (do 40 °C).
- Lehce ručně ždímejte v osušce.
- Sušte v nezavěšeném stavu!
- **Nežehlete! Nevešte! Nesušte na přímém slunci ani na topení!**

# SNÍŽEK

ORTOPROTETIKA

**PŘÍBALOVÁ INFORMACE**
Informace pro pacienta

# BANDÁŽ ŽEBERNÍ FIXAČNÍ

## SNÍŽEK 100HR

**Výrobce a distributor:**
**SNÍŽEK s.r.o.**
Obřanská 940/60, 614 00 Brno
IČO: 469 65 998

**Kontakt:**
Tel: 545 215 856
E-mail: snizek@snizek-ortezy.cz
Web: www.snizek-ortezy.cz

**Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento příbalový leták!**

## NÁVOD K APLIKACI

1. Zvolte správnou velikost dle tabulky obvodu hrudníku.
2. Pás přiložte těsně pod prsa.
3. Obepněte pevně přes žebra.
4. Utáhněte a zapněte na suchý zip.

## POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ

- Ortézu uchovávejte na suchém a temném místě.
- Ve spolupráci s odbornými prodejci nebo lékařem dbejte na výběr správné velikosti a nasazení.
- Výrobek je určený pro opakované používání pro jednoho pacienta a je tudíž nepřenosný.
- Na výrobku se nesmí provádět žádné změny. Ty by mohly vést ke zhoršení výsledků působení pomůcky a rovněž by došlo ke ztrátě odpovědnosti výrobce za výrobek.
- Délku denního nošení ortézy a celkovou dobu používání zpravidla určuje ošetřující lékař.
- Účinky ortézy se projevují převážně během fyzické aktivity. Před prodlouženou dobou fyzické nečinnosti (např. během spánku) doporučujeme ortézu sejmout.

## NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nežádoucí účinky nebyly dosud hlášeny. Jakékoli ortézy upevňované zevně k tělu mohou však při nadměrném utažení vést k tvorbě místního otlaku, výjimečně i ke zúžení krevních cév a nervů ve tkáni pod nimi.
Pouze po poradě se svým lékařem nebo prodejcem zdravotnických pomůcek byste měli pomůcku používat, pokud trpíte na zhoršený mízní odtok, oběhové poruchy, otoky měkkých tkání nejistého původu, které se nacházejí mimo nasazenou ortézu, nebo kožní poranění či zánět v místě nasazení ortézy. Kombinaci s dalšími pomůckami kompresivní povahy (např. kompresní punčochy) předem konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.

V případě reklamací v souvislosti s výrobkem se prosím obraťte přímo na svého specializovaného prodejce zdravotnických prostředků. Pouze závažné nežádoucí příhody, které mohou vedost ke značnému zhoršení zdravotního stavu nebo ke smrti, je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.

## LIKVIDACE

Dosloužily výrobek můžete odstranit s běžným komunálním odpadem.